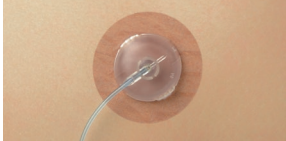



















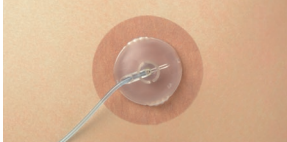


















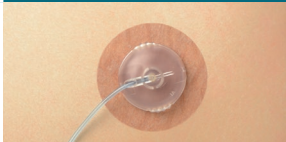


































Infusionssets auf einen Blick



	mylife YpsoPump	Dana-i	MiniMed 600er- und 700er-Serie	
Infusionssets mit Softkanüle	mylife YpsoPump Orbit soft	Dana inset II	MiniMed Mio Advance	MiniMed Mio 30
				
	   	   	   	   
Hersteller / Vertrieb	Ypsomed	SOOIL / IME-DC	Medtronic	Medtronic
Kanülenlängen / -füllmengen	6; 9 mm / 0,3 I.E.; 0,4 I.E.	6; 9 mm / 0,1 I.E.; 0,2 I.E.	6; 9 mm / je 0,6 I.E.	13 mm / 0,7 I.E.
Schlauchlängen	45 (nur 6 mm); 60; 80 cm	46 (nur 6 mm); 60; 80 cm	60; 110 cm	60; 110 cm
Kanülen einzeln erhältlich	ja	nein	nein	nein
Infusionssets mit Softkanüle	mylife YpsoPump Inset	Soft-Release-O	MiniMed Quick-Set	Wellion EASY SET TEFLON
				
	   	   	   	   
Hersteller / Vertrieb	Ypsomed	SOOIL / IME-DC	Medtronic	Medtrust
Kanülenlängen / -füllmengen	6; 9 mm / 0,1 I.E.; 0,2 I.E.	6; 9 mm / 0,3 I.E.; 0,4 I.E.	6; 9 mm / 0,3 I.E.; 0,5 I.E.	6; 9 mm / 0,2 I.E.; 0,3 I.E.
Schlauchlängen	46 (nur 6 mm); 60; 80 cm	60 (nur 6 mm); 80 (nur 9 mm) cm	45 (nur 6 mm); 60; 80; 110 cm	60; 110 (nur 9 mm) cm
Kanülen einzeln erhältlich	nein	nein	nein	nein
Infusionssets mit Stahlkanüle	mylife YpsoPump Orbit micro 2.0	Easy-Release	MiniMed Sure-T	
				
	   	   	   	
Hersteller / Vertrieb	Ypsomed	SOOIL / IME-DC	Medtronic	
Kanülenlängen / -füllmengen	5,5; 8,5 mm / –	4,5; 7; 9 mm / –	6; 8; 10 mm / –	
Schlauchlängen	45 (nur 5,5 mm); 60; 80 cm	60; 110 (nur 7; 9 mm) cm	45 (nur 6 mm); 60; 80 cm	
Kanülen einzeln erhältlich	ja	nein	nein	

Accu-Chek Insight	Accu-Chek Spirit Combo		Kaleido-Insulinpumpe	Accu-Chek Solo
Accu-Chek Insight Flex	Accu-Chek FlexLink	Accu-Chek TenderLink	Kaleido Top-up Kit	Accu-Chek Solo
   	   	   	   	   
Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	ViCentra	Roche Diabetes Care
6; 8; 10 mm / je 0,7 I.E.	6; 8; 10 mm / je 1,0 I.E.	13; 17 mm / je 0,7 I.E.	6; 9 mm / 0,2 I.E.; 0,25 I.E.	6; 9 mm / je 0,18 I.E.
40; 70; 100 cm	30; 60; 80; 110 (nur 8; 10 mm) cm	30; 60; 80; 110 cm	5; 30 cm	–
ja	ja	ja	nein	ja
Accu-Chek Insight Tender	Cleo 90	mylife Orbit soft		
   	   	   		
Roche Diabetes Care	ICU Medical	Ypsomed		
13; 17 mm / je 0,9 I.E.	6; 9 mm / 0,2 I.E.; 0,3 I.E.	6; 9 mm / 0,3 I.E.; 0,4 I.E.		
40; 70; 100 cm	60; 80; 110 cm	60; 105 (nur 9 mm) cm		
ja	nein	ja		
Accu-Chek Insight Rapid	Accu-Chek Rapid-D Link	mylife Orbit micro		
   	   	   		
Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	Ypsomed		
6; 8; 10 mm / –	6; 8; 10; 12 mm / –	5,5; 8,5 mm / –		
40; 70; 100 cm <sup>1</sup>	20; 50; 70; 100 cm <sup>2</sup>	60; 75 cm		
ja	ja	ja		

Merkmale der Infusionssets

Kanülenart	Abkoppelbar
<b>Softkanüle</b>	 direkt am Kanülenträger
Softkanülen (auch bekannt als Kunststoff- oder Teflonkanülen) sind biegsam, machen jede Bewegung mit und sind etwas dicker als Stahlkanülen. Das Einführen wird bei den meisten Modellen durch eine Setzhilfe (Serter) erleichtert. Diese Kanülen sollten nach 2 bis 3 Tagen <sup>3</sup> gewechselt werden.	 am Verbindungsschlauch
	 an der Pumpenhalterung
Anschlussart	
<b>Stahlkanüle</b>	 Accu-Chek Insight
Stahlkanülen sind hauchdünn. Sie sollten nach 1 bis 2 Tagen <sup>3</sup> gewechselt werden.	 Dana Luer
	 Dana Luer Universal <sup>4</sup>
Einführungswinkel	
 senkrecht (90°)	 Kaleido
 schräg (30°)	 MiniMed
 variabel (20–45°)	 mylife YpsoPump
	 Luer
Setzhilfe	
 keine	
 integriert	
 separat	

Wann Kanülen gelegt werden sollten

Legen Sie eine neue Kanüle am besten morgens und vor einer Bolusabgabe (Mahlzeit). So kann Gewebe, welches sich möglicherweise nach dem Einführen in der Kanüle befindet, herausgespült werden. Wechseln Sie nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen Ihr Infusionsset.

Rundum gut versorgt

Passende Desinfektionsmittel, Pflasterentferner, Hautschutz- und Fixierungsprodukte finden Sie in unseren Fachgeschäften vor Ort sowie in unseren Online-Shops auf [www.diaexpert.de](http://www.diaexpert.de) (für DiaExpert Kunden) und [www.mediqdirekt.de](http://www.mediqdirekt.de) (für Mediq Direkt Diabetes Kunden).



<sup>1</sup> zzgl. 7 cm Schlauch an der Kanüle  
<sup>2</sup> zzgl. 10 cm Schlauch an der Kanüle  
<sup>3</sup> Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.  
<sup>4</sup> kompatibel mit der Dana-i Insulinpumpe sowie allen Insulinpumpen mit Luer-Anschluss

**Rechtlicher Hinweis:** Wir haben diese Übersicht und alle darin enthaltenen Angaben äußerst sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben leider keine Haftung übernehmen. Eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung der Angaben verursacht werden, ist ausgeschlossen. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko der Anwendenden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen.